

Flowsensor A

P/N: 4310001

Zweckbestimmung

Hitzdraht - Flowsensor zur Messung des Volumenstromes in Anästhesie- u. Beatmungsgeräten des Herstellers DRÄGER, kompatibel zu:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spirolog FlowSensor	8403735-06

Betrieb

- Keine Medikamente oder andere Stoffe auf der Basis von brennbaren Lösungsmitteln, wie z.B. Alkohol, in das Patientsystemen bringen, Brandgefahr!
- Keine explosiven Anästhesiemittel verwenden (z.B. Äther oder Cyclopropan)!
- Nach der Verwendung mit Medikamentenverneblern den Flowsensor sofort reinigen und aufbereiten.
- Alternative: Einen Filter vor dem Flowsensor einsetzen.

Aufbereitung

- Abgleich, Handhabung und Sensorwechsel entsprechend der jeweiligen gerätespezifischen Gebrauchsanweisung
- Nicht im Reinigungs-/Desinfektionsautomat behandeln. Nicht mit Druckluft, Wasserstrahl, Bürste u.ä. reinigen.
- Die Wiederbenutzung des Sensors kann die Sicherheit des Patienten wegen der möglichen Kontamination des Sensors beeinträchtigen.
- **Die Lebensdauer des Sensors ist begrenzt. Wenn der Kalibriervorgang nicht mehr möglich ist, muss ein Austausch vorgenommen werden.**

Desinfizieren

- In 70%iger Ethanol- oder Isopropanollösung ca 1h desinfizieren.
- Anschließend mindestens 30 Minuten ablüften lassen. Folgende Instrumenten - Desinfektionsmittel können verwendet werden:
 - Korsolex Basic/Extra/Plus (Fa. Bode Chemie, Hamburg, Germany)
 - Gigasept FF/AF (Fa. Schülke&Mayr, Norderstedt, Germany)

Sterilisieren

- Flowsensor A ist nicht autoklavierbar oder sterilisierbar

Flowsensor A

P/N: 4310001

Intended Use

Hot wire flow sensor for measuring the flow in Dräger anaesthesia and ventilation units compatible with:

Description	Order-No.
Spirolog FlowSensor	8403735-06

Operation

- Do not introduce any medicaments or other substances based on combustible solvents, such as alcohol, into the patient systems. Fire risk!
- Do not use explosive anaesthetic agents (e.g. ether or cyclopropane)!
- After using with medicament nebulisers, immediately clean and treat the flow sensor as specified.
- Alternatively: Install a filter upstream of the flow sensor.

Care

- Alignment, operation and sensor change must be carried out in accordance with the relevant device-specific instruction manual
- Do not clean in an automatic cleaning/disinfecting machine. Do not clean with compressed air, water jet, brush etc.
- Reusing the sensor may affect patient's safety due to the possible contamination of the sensor.
- **Life cycle of the sensors is limited. It can be used as long as calibration in the evaluation unit is possible.**

Disinfecting



- Disinfect for approx. 1h in 70% ethanol or isopropanol solution.
- Then allow to dry in air for at least 30 minutes.

The following instruments disinfectants can be used:

- Korsolex Basic/Extra/Plus (Bode Chemie, Hamburg, Germany)
- Gigasept FF/AF (Schülke&Mayr, Norderstedt, Germany)

Sterilising

- Flowsensor A can not be autoclaved or sterilised

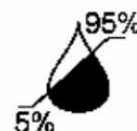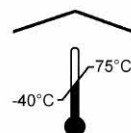

Viamed Ltd

15 Station Road

Cross Hills

Keighley

West Yorkshire, BD20 7DT

United Kingdom

