

Flowsensor A
P/N: 4310001

Zweckbestimmung

Hitzdraht - Flowsensor zur Messung des Volumenstromes in Anästhesie- u. Beatmungsgeräten des Herstellers DRÄGER, kompatibel zu:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spirolog Flowsensor	8403735-06

Betrieb

- Keine Medikamente oder andere Stoffe auf der Basis von brennbaren Lösungsmitteln, wie z.B. Alkohol, in das Patientsystemen bringen, Brandgefahr!
- Keine explosiven Anästhesiemittel verwenden (z.B. Äther oder Cyclopropan)!
- Nach der Verwendung mit Medikamentenverneblern den Flowsensor sofort reinigen und aufbereiten.
Alternative: Einen Filter vor dem Flowsensor einsetzen.

Aufbereitung

- Abgleich, Handhabung und Sensorwechsel entsprechend der jeweiligen gerätespezifischen Gebrauchsanweisung.
- Nicht im Reinigungs-/Desinfektionsautomat behandeln. Nicht mit Druckluft, Wasserstrahl, Bürste u.ä. reinigen.
- Die Wiederbenutzung des Sensors kann die Sicherheit des Patienten wegen der möglichen Kontamination des Flowsensors beeinträchtigen.
- **Die Lebensdauer des Sensors ist begrenzt. Wenn der Kalibriervorgang nicht mehr möglich ist, muss ein Austausch vorgenommen werden.**

Desinfizieren

Folgende Instrumenten - Desinfektionsmittel können verwendet werden:

- Korsolex Basic/Extra/Plus (Fa. Bode Chemie, Hamburg, Germany)
- Gigasept FF/AF (Fa. Schülke&Mayr, Norderstedt, Germany)
- Incidin Liquid (Fa.Ecolab Deutschland GmbH, Germany)

- Herstellerhinweise des Desinfektionsmittels beachten.
- Flowsensor tauchdesinfizieren.
- Auf erkennbare Verschmutzung und Beschädigungen achten.
- Anschließend der Flowsensor mit Wasser (bevorzugt Sterilwasser) spülen und mindestens 30 Minuten ablüften lassen.

Sterilisieren

- Flowsensor A ist **nicht** autoklavierbar oder sterilisierbar.

Entsorgung

- Flowsensor wie infektiösen Sondermüll entsorgen.

Flowsensor A
P/N: 4310001

Intended Use

Hot wire anemometric flow sensor, for measuring gas flow in Dräger anaesthesia and ventilation equipment. The sensor is compatible to:

Description	Order-No.
Spirolog flow sensor	8403735-06

Operation

- Due to fire risk - do not introduce any medicaments or other substances based on combustible solvents, such as alcohol, into the patient systems.
- Do not use explosive anaesthetic agents (e.g. ether or cyclopropane).
- After using with medicament nebulisers, immediately clean and treat the flow sensor as specified. Alternatively, install a filter upstream of the flow sensor.

Care

- Alignment, operation and sensor change must be carried out in accordance with the relevant device-specific instruction manual.
- Do not clean in automated cleaning/disinfection equipment. Do not clean with compressed air, water jets, brushes etc.
- Reusing the flow sensor may affect patient safety due to the possible contamination of the sensor.
- **Life cycle of the sensor is limited. It can be used as long as calibration in the anaesthesia or ventilation equipment is possible.**

Disinfection

The following instrument disinfectants can be used:

- Korsolex Basic/Extra/Plus (Bode Chemie, Hamburg, Germany)
- Gigasept FF/AF (Schülke&Mayr, Norderstedt, Germany)
- Incidin Liquid (Fa.Ecolab Deutschland GmbH, Germany)


- Strictly follow the manufacturer's instructions on the disinfectant.
- Disinfect the flow sensor by immersion.
- Inspect the flow sensor for soiling and damage.
- Rinse the flow sensor under water (preferably sterile water) and then allow to dry in air for at least 30 minutes.

Sterilization

- The flow sensor **can not** be autoclaved.

Disposal

- The flow sensor must be disposed of as infectious waste.

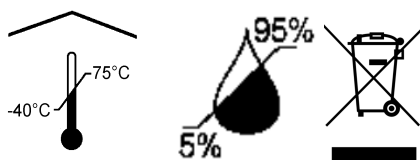

Viamed Ltd
15 Station Road
Cross Hills
Keighley
West Yorkshire, BD20 7DT
United Kingdom

